



LED's be independent!



alegra



# Helder LED-licht voor iedereen.

Aandrijving aan = LED-licht aan. Deze baanbrekende innovatie is even verbluffend als geniaal. Een ingebouwde generator is de geïntegreerde energiebron voor LED-licht met daglichtkwaliteit en werkt volgens hetzelfde principe als de dynamo van een fiets.

## **Prettiger werken met LED-licht**

Een echte innovatie van W&H: het zelfopgewekte LED-licht is helder, neutraal van kleur en vele malen sterker dan gewoon halogeenlicht. De LED-lichtgenerator is reeds in de Alegra hand- en hoekstukken ingebouwd en werkt daarmee volledig onafhankelijk. Dus ook op motoren zonder externe lichtvoorziening!

## **Gegarandeerd betrouwbaar**

Met de nieuwe generatie Alegra hand- en hoekstukken maken wij de beproefde W&H-kwaliteit made in Austria met de meest moderne LED-technologie toegankelijk voor iedereen. Het brede Alegra assortiment biedt precies datgene wat u nodig hebt. Niet meer. En zeker ook niet minder. Degelijk, duurzaam en zonder dat u in andere technische apparatuur hoeft te investeren.

## **Schone oplossing**

Alegra hand- en hoekstukken zijn thermodesinfecteerbaar en steriliseerbaar. Ze zijn ontwikkeld om een efficiënte hygiënische behandeling te garanderen.



Wij laten LED-licht met daglichtkwaliteit overal schijnen. Alegra hand- en hoekstukken zijn compatibel met alle gangbare elektro- en luchtmotoren.

### Lange levensduur


Alegra hand- en hoekstukken zijn erg stevig, geluids- en slijtage-arm – voor een lange levensduur.

### Betrouwbare koeling

Alegra hand- en hoekstukken zijn verkrijgbaar met een drievoudige spray om altijd de optimale koeling van het complete behandelingsgebied te garanderen.

### Veiligheid van A tot Z

De Data Matrix code maakt de productidentificatie en het volgen van het hygiëne- en onderhoudsproces eenvoudiger.

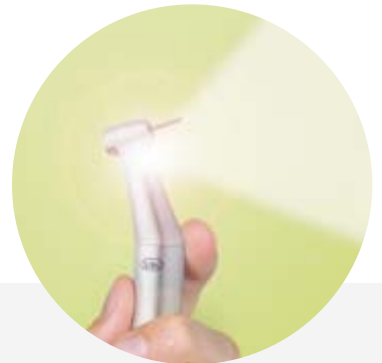

### Alegra hand- en hoekstukken



Uitvoeringen:	WE-99 LED G	WE-56 LED G	WE-66 LED G
Verlichtingskwaliteit:	Daglicht	Daglicht	Daglicht
Overbrenging / reductie:	1 : 4,5	1 : 1	4 : 1
Kopgrootte (Ø mm):	10,1	10,1	10,1
Kophoogte met boor (mm):	22,3	20,7	20,7
Roterende instrumenten Ø / max. lengte (mm):	1,6 / 25	2,35 / 34	2,35 / 34
Spray:	3-voudig	enkelvoudig	enkelvoudig
Garantie:	12 maanden	12 maanden	12 maanden

**ISO-aansluiting op:**  
elektromotoren  
en luchtmotoren

# LED's do it!

U hebt alleen profijt van de beste innovatie, als u er meteen mee kunt werken. Daarom heeft W&H ervoor gezorgd dat LED-licht met daglichtkwaliteit onafhankelijk werkt. Zonder enige moeite. Zonder verdere investeringen.

## **Absoluut onafhankelijk**

Het idee van een generator als onafhankelijke energiebron was niet nieuw. Maar het idee om een generator direct in een tandheelkundig instrument in te bouwen en zo – volledig onafhankelijk van uw bestaande eenheid – helder LED-licht te leveren, is een wereldprimeur. Laat u betoveren!



**Heeft Alegra uw interesse gewekt?**

**Meer informatie is verkrijgbaar bij uw dental depot, bij W&H of op [wh.com](http://wh.com).**

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t +43 (0) 6274 6236-0  
f +43 (0) 6274 6236-55  
[office@wh.com](mailto:office@wh.com)  
[wh.com](http://wh.com)

